




ERGONOVA

MeTime 2

Массажное кресло-качалка

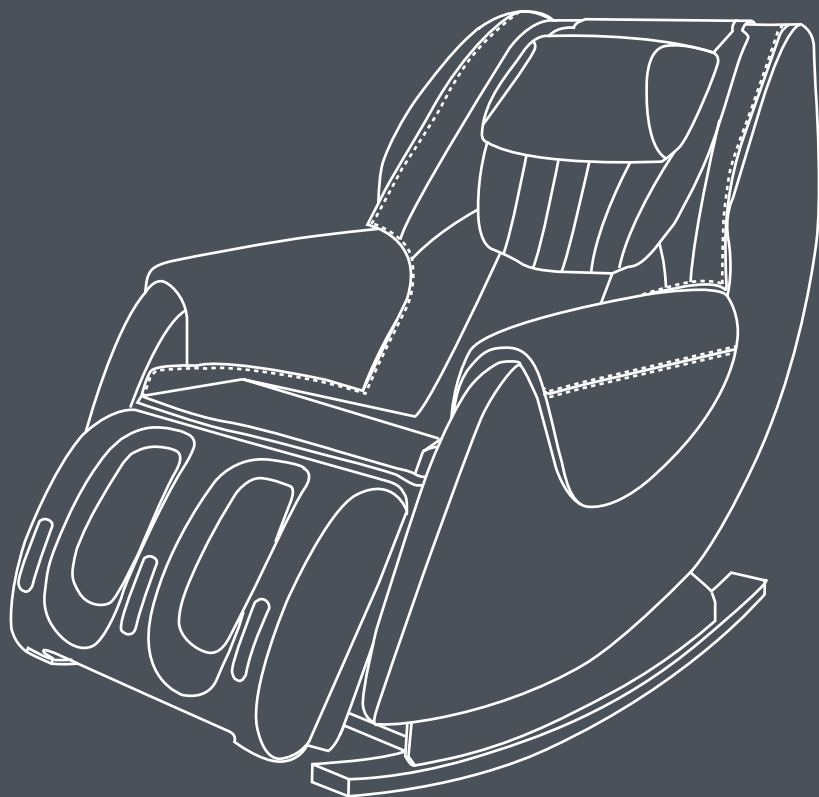

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажного кресла-качалки Ergonova MeTime 2! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	3
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	4
КНОПКИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8

Меры предосторожности

1. Не используйте в ванных комнатах, кухнях, или других местах с высокой температурой и влажностью, под прямыми солнечными лучами. Запрещается использовать в местах с агрессивными, легко воспламеняющимися и взрывоопасными веществами (такими как пыль, бензин, газ, пар и т.д.).
2. Лица с описанными ниже симптомами или проходящие медицинское лечение должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера:
 - Беременные или в период менструации.
 - Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов.
 - Страдающие геморрагической болезнью, сепсисом, лихорадочным синдромом и аномальными физическими состояниями.
 - Наличие заболеваний спины, шеи и тазобедренных суставов.
 - Наличие злокачественных опухолей, заболеваний сердца, гипертонии и других острых заболеваний.
 - Остеопороз, переломы позвоночника или серьезные травмы.
3. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
4. Во избежание игр с креслом дети должны находиться под присмотром.
5. Поверхности прибора могут нагреваться. Люди, не чувствительные к нагреву, должны быть внимательны при использовании.
6. Не садитесь в массажер с недосушенными волосами или телом.
7. Не прикасайтесь к вилке и кабелю питания мокрыми руками.
8. Не засовывайте пальцы в массажные механизмы, чтобы избежать защемления.
9. Не садитесь на изделие и не кладите на него тяжелые предметы.
10. Не садитесь на пульт управления.
11. Не тяните, не перекручивайте и не перегибайте сетевой кабель или провода пульта управления.
12. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно массажер. При возникновении каких-либо проблем, пожалуйста, обратитесь в магазин покупки.
13. При повреждении тканевого (кожаного) чехла или корпуса, немедленно прекратите использование кресла. Замените поврежденные детали в центре послепродажного обслуживания, указанном производителем.
14. Если кабель питания поврежден, немедленно отключите его. Обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
15. Отключайте устройство от электросети во время грозы.
16. Массажер поставляется с заводским кабелем питания. Кабель предназначен только для этого массажного кресла и не должен использоваться в других целях.


17. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе массажного кресла, немедленно прекратите его использование, отключите питание и обратитесь в магазин покупки, либо в центр послепродажного обслуживания.

18. Отключите кресло от сети после использования.


19. Массажное кресло оснащено интеллектуальной системой защиты от перегрева. В случае непредвиденной остановки, отключите питание кресла и дайте двигателю остыть.

20. Шум во время работы вызван работой массажных механизмов и мотора. Это нормальное явление и не требует устранения.


Наименование деталей

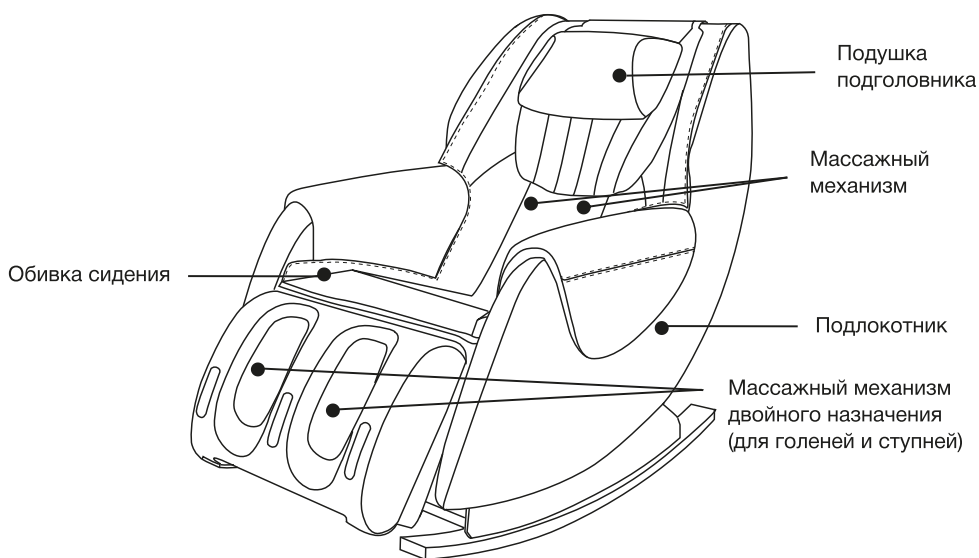

Пульт управления

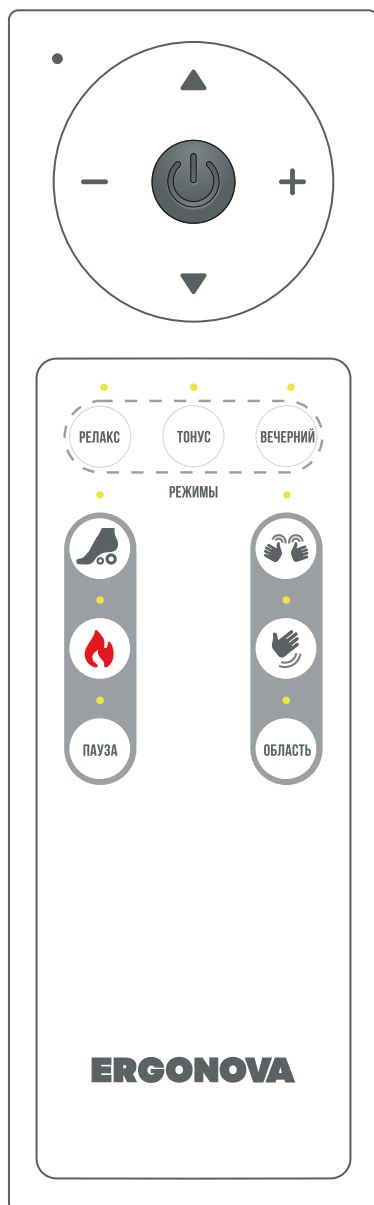

Кнопки пульта управления

Кнопка	Функция	Описание
	Кнопка питания (вкл/выкл)	После включения массажный ролик поднимается до верхнего положения, затем опускается до уровня плеч. У вас будет 6 секунд, чтобы самостоятельно отрегулировать необходимое положение массажного ролика до автоматического включения программы массажа. Через 6 секунд массажное кресло начнет программу массажа по умолчанию. Вы можете переключать функции в соответствии со своими потребностями. Нажмите на кнопку питания, чтобы выключить устройство.
	Ролик вверх	Зажмите и удерживайте, пока ролик не достигнет нужного положения
	Ролик вниз	Зажмите и удерживайте, пока ролик не достигнет нужного положения
	Увеличение интенсивности	Каждое нажатие увеличивает интенсивность на один уровень
	Уменьшение интенсивности	Каждое нажатие снижает интенсивность на один уровень
РЕЛАКС	Программа «Релакс»	Нажмите на кнопку, чтобы запустить программу
ТОНУС	Программа «Тонус»	Нажмите на кнопку, чтобы запустить программу
ВЕЧЕРНИЙ	Программа «Вечерний»	Нажмите на кнопку, чтобы запустить программу
	Ролик для стоп	Нажмите на кнопку, чтобы включить роликовый массаж для стоп. Повторное нажатие отключает функцию
	Подогрев	Включает/отключает функцию подогрева
ПАУЗА	Пауза	Приостановка/ возобновление массажа
	Разминание	Включает/отключает технику разминающего массажа
	Постукивание	Включает/отключает технику постукивающего массажа
ОБЛАСТЬ	Область массажа	Выбор области или массаж всего тела

Эксплуатация

1. Включение массажного кресла

Подключите кабель питания.

2. Начало массажа

Нажмите один раз кнопку питания, чтобы включить пульт дистанционного управления, загорится красный индикатор на пульте. Нажмите еще раз кнопку питания, что бы начать массаж. Через 8 секунд после сканирования тела включается автопрограмма массажа. Время автопрограммы 15 минут. Через 2 минуты работы массажного кресла, пульт дистанционного управления перейдет в спящий режим для экономии энергии. Для выхода из спящего режима пульта - нажмите кнопку включения один раз. Для остановки массажа - нажмите на кнопку питания на пульте и дождитесь полной остановки.

3. Отключение массажного кресла

Всегда вынимайте вилку питания из розетки сразу после завершения использования массажного кресла.

4. Перемещение массажного кресла

Убедитесь, что массажер отключен от сети. Приподнимите массажное кресло за подлокотники с обеих сторон и перенесите в нужное место.

(Примечание: Перед отсоединением кабеля питания от розетки, отключите массажер).

Уход и обслуживание

1. Перед чисткой или обслуживанием прибора вилку необходимо вынуть из розетки.
2. После каждого использования, пожалуйста, протирайте изделие и аксессуары мягкой сухой тканью. Если искусственная кожа особенно загрязнена, протрите ее мягкой тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, тщательно отжатой. Избегайте использования химических растворителей, абразивных чистящих средств или металлических щеток и т.д. Если подушка подголовника загрязнится в процессе эксплуатации, чехол легко можно расстегнуть и снять для дальнейшей очистки.
3. Запрещается погружать в воду, мочить, разбирать и самостоятельно чистить массажный механизм.
4. Запрещено использовать устройство на открытом воздухе, во влажных помещениях или под воздействием прямых солнечных лучей. Если устройство не используется, его следует хранить в сухом и проветриваемом месте.
5. Не нажимайте на пульт управления твердыми или острыми предметами.
6. Избегайте перегрузки, падения, царапания поверхности массажного кресла.

УТИЛИЗАЦИЯ




По истечении срока службы массажного кресла, пожалуйста, утилизируйте его надлежащим образом. Переработка электронных отходов – основное условие защиты окружающей среды. Перед утилизацией аккумулятора необходимо вынуть из устройства. При извлечении аккумуляторной батареи необходимо отключить прибор от электросети; после извлечения аккумулятор следует безопасно утилизировать.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Массажное кресло не работает	Проверьте подключение к сети	Проверьте плотность соединения вилки питания с розеткой
Внезапное прекращение работы	Устройство отработало заданное время в 15 минут и перешло в режим ожидания	Закончилось время автопрограммы
	Включилась защита двигателя от перегрева из-за длительной работы	Дайте двигателю остыть и снова запустите массажер
	Слишком большая нагрузка на массажные механизмы	Пожалуйста, слегка приподнимите корпус, чтобы уменьшить нагрузку на механизм
	Произошло отключение питания	После восстановления подачи питания повторно включите
Звуки, исходящие от устройства	Звук работы механизмов	Этот звук является нормальным и не требует устранения

Если вышеуказанными способами устранить проблему не удастся, обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

1. Название: Массажное кресло-качалка
2. Модель: MeTime 2
3. Номинальная мощность: 96 Вт
4. Номинальное напряжение: 220 В, 50/60 Гц
5. Входной электрод: 

Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

