

**TAKASIMA**

# Массажер для ног

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажер для ног

**TAKASIMA**

Представитель ООО «Корда» по России  
190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, 9

Телефон: +7 (812) 363-43-33  
E-mail: office@korda.spb.ru

[www.takasima.ru](http://www.takasima.ru)



**M-8800**

# Содержание

Функции .....	3
Возможности .....	3
Структура .....	3
Описание компьютеризированной панели .....	4
Пульт управления .....	4
Использование .....	5
Выбор программы массажа .....	5
Правила безопасности .....	6-7
Правила эксплуатации .....	7

**Благодарим за выбор использования нашего оборудования.**  
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией.  
После ознакомления держите инструкцию рядом с массажером.  
В дальнейшем инструкция может быть дополнена.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

○ **Название:** массажер для ног

○ **Номинальное напряжение:** 24 вольт.

○ **Мощность :** 30 Ватт

○ **Время работы:** 15 минут

## Внимание:

Не сидите и не стойте на массажере, это может повредить мотор.

Рекомендуемое время использования массажера – 15 минут.

Если во время использования прибора вы почувствовали недомогание, сразу же отключите аппарат.

Если вы почувствуете зуд в ногах во время или после использования массажера, то это нормальное явление, вызванное циркуляцией крови.

Лица, чувствительные к повышению температуры, должны быть осторожны в использовании функции нагрева.

Предостерегайте детей и лиц, нуждающихся в присмотре, от самостоятельного использования аппарата.

## Инструкция по подключению к электросети:

Проверьте соответствие параметров электросети параметрам аппарата.

Вынимайте вилку из розетки аккуратно.

Не вынимайте вилку из розетки влажными руками.

Выключая прибор, держитесь рукой за вилку, не тяните провод.

Не ставьте аппарат или что-то тяжелое на шнур.

Во избежание замыканий, не обматывайте провод вокруг аппарата.

Если шнур питания поврежден, для замены его обратитесь к поставщику или в сервисную службу.

Используйте фирменные дополнительные аксессуары.

Подключайте только к розетке (прямое соединение опасно).

## Правила эксплуатации:

Выключите питание и выньте вилку из розетки перед тем, как мыть аппарат.

Не используйте бензин или другие растворители для чистки аппарата.

Не протирайте аппарат сырой тряпкой.

Не используйте аппарат в теплых, влажных помещениях, в атмосфере, вызывающей коррозию, и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### О Правила безопасности

Во избежание несчастных случаев, пользуйтесь аппаратом только для массажа.

Не используйте аппарат в случае повреждений или утраты частей.

Не давайте аппарат детям или людям, нуждающимся в присмотре.

Не сидите и не стойте на аппарате.

Не используйте горючие материалы или металлические предметы во избежание воспламенения, удара током или короткого замыкания.

Не используйте прибор дольше одного часа.

Не накрывайте прибор тканью во время использования. Это может повлечь перегрев и воспламенение прибора.

Во избежание несчастных случаев, не тяните за шнур во время использования.

Не используйте аппарат во время сна.

### О Дополнительно

Не используйте в жарких или влажных помещениях, таких как ванная комната, плавательный бассейн.

Не используйте аппарат, если ваше тело полностью влажное. Это может повлечь удар током или короткое замыкание.

Не используйте аппарат в грязных, задымленных помещениях.

### ● Противопоказания

Следующие категории людей должны проконсультироваться с врачом:

- Онкологические больные
- Больные остеопорозом
- Больные после хирургических операций
- Больные с новообразованиями
- Больные с температурой
- Беременные
- Больные с тяжелыми заболеваниями

### ● Предостережение

В следующих ситуациях выключите аппарат кнопкой и выньте шнур электропитания:

при пролитии воды или других жидкостей на аппарат

если вы почувствовали недомогание во время сеанса

если аппарат не работает нормально

если панель контроля неисправна (работает с задержкой)

если есть искры.

### О Правила обслуживания

Только специальные технические службы могут разбирать прибор с целью ремонта.


## ФУНКЦИИ

1. Функция удаленного беспроводного контроля и удобный для пользователя дизайн.
2. Устройство для обогрева ног с 64 магнитами. Одновременное тепловое и магнитное терапевтическое воздействие.
3. Автоматическое воздействие на точки акупунктуры и 3D массаж, аналогичный массажу руками.
4. Настройка на индивидуальные предпочтения пользователя по интенсивности воздействия: низкая, средняя и высокая.
5. Роликовый механизм стимулирует биологически активные точки на стопе и нервные окончания.
6. Массаж может способствовать устранению искривлений ступни.
7. Компьютеризированная панель управления удобно и легко настраивает массажер на удобную вам программу массажа.
8. Время работы – 15 минут.
9. Съемная тканевая поверхность в массажных отделениях легко моется.


## ВОЗМОЖНОСТИ

1. Расслабление мышц ноги и стопы
2. Стимулирование акупунктурных точек и снятие усталости
3. Стимуляция кровообращения
4. Снятие напряжения и уменьшение отека
5. Снятие усталости и снижение боли в мышцах
6. Исправление искривлений стопы

## СТРУКТУРА

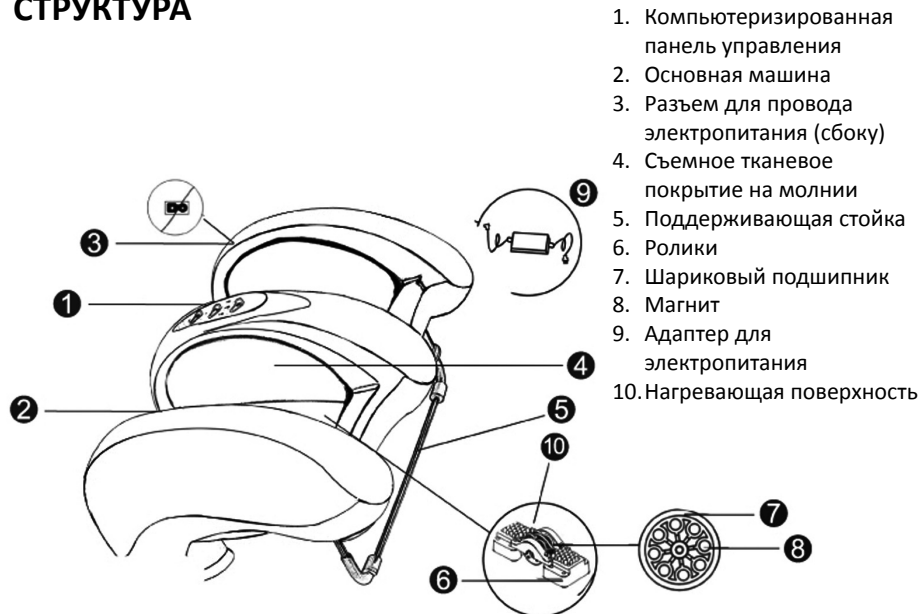



## Описание компьютеризированной панели

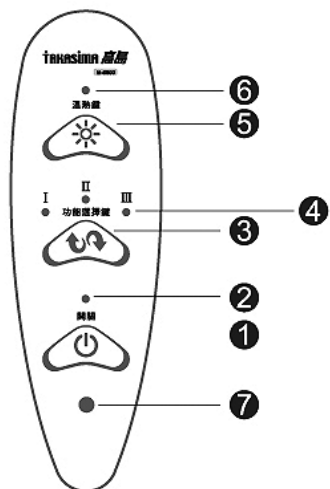

1. Вкл./Выкл.
2. Режим ожидания
3. Выбор функции
4. Индикатор функций
5. Выбор нагрева
6. Индикатор нагрева
7. Индикатор дистанционного управления

## Пульт дистанционного управления


1. Вкл./Выкл.
2. Выбор нагрева
3. Программа I
4. Программа II
5. Программа III

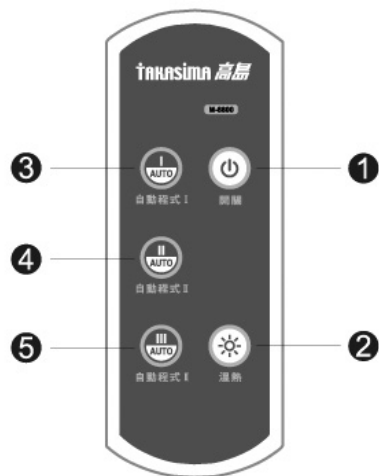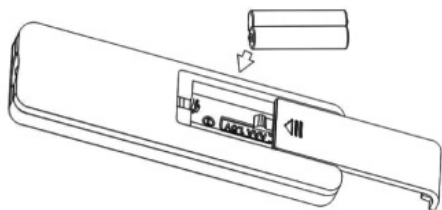


### ВНИМАНИЕ:

во время работы пульта дистанционного управления светится индикатор его работы. При нажатии нужной кнопки на пульте появляется вспышка, и выбранная функция включается на аппарате. Если функция не выполняется, проверьте батарейки пульта. Не пользуйтесь одновременно компьютерной панелью вручную и пультом одновременно, иначе можно сбить программу.

## Как пользоваться

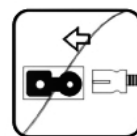


Вставьте шнур электропитания в гнездо сбоку

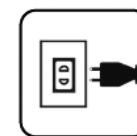

Вставьте вилку в розетку, загорится индикатор электропитания



Выберите нужную позицию и угол, вставьте ногу в массажное отделение

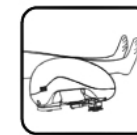

Выбрав место массажа, положите ноги соответственно



Для удобной установки массажера подвигайте поддерживающую стойку



Выберите программу массажа








Если хотите использовать функцию нагрева, нажмите кнопку нагрева



По завершении сеанса, выключите массажер кнопкой и выньте вилку из розетки

## Выбор программы массажа

1. Поместите ноги в массажное отделение
2. Нажмите  для выбора программы I
3. Нажмите  дважды для выбора программы II
4. Нажмите  трижды для выбора программы III
5. Нажмите  для выбора функции нагрева
6. Нажмите  для окончания сеанса массажа

### ВНИМАНИЕ:

полное время одного сеанса массажа по каждой программе составляет 15 минут. Массажер изменит время, если Вы поменяете программу.